


Hub- Auszieh- & Drehwanne Fantasy 190



Installationszeichnung

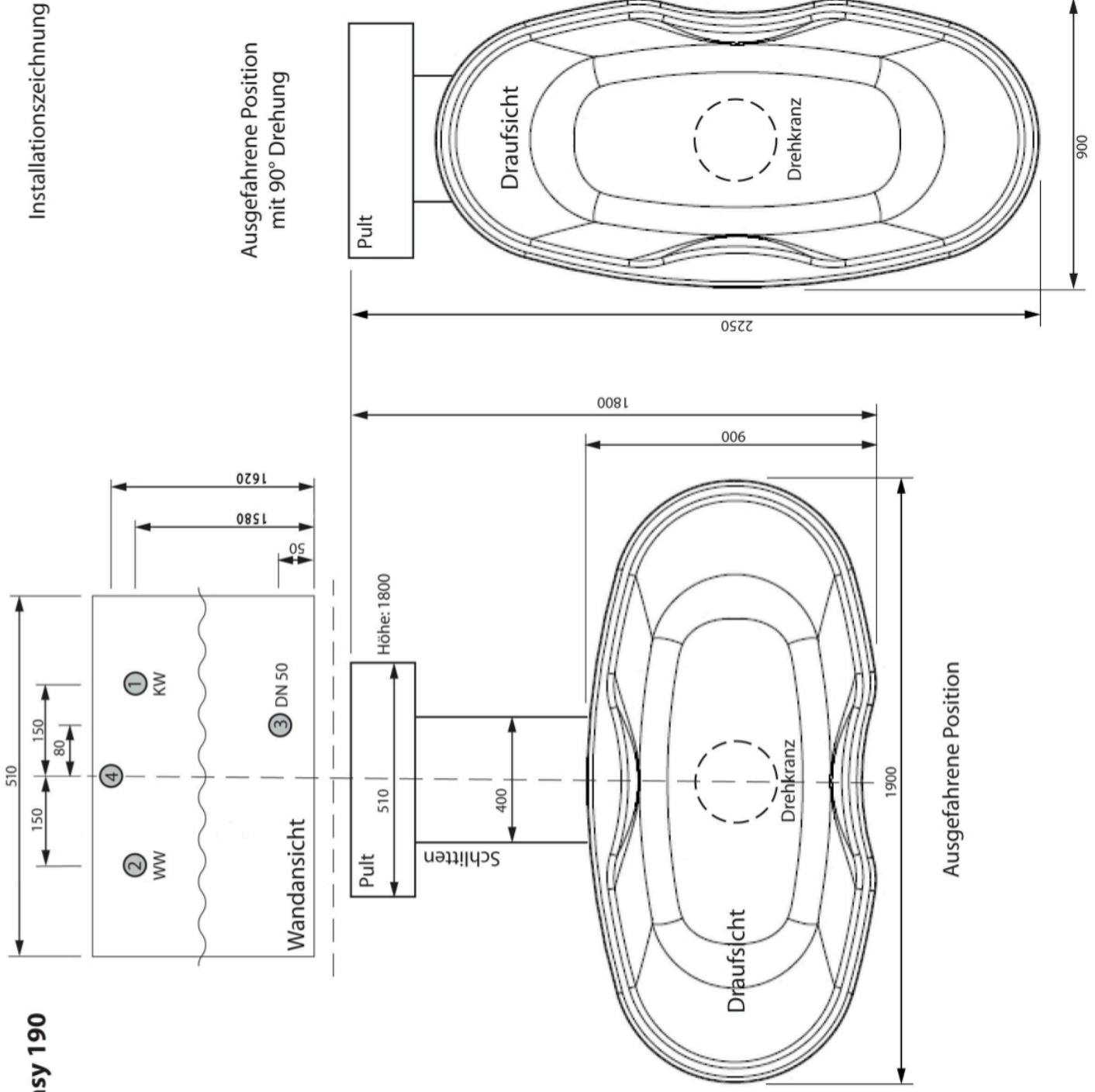

Ausgefahrene Position mit 90° Drehung

Ausgefahrene Position

Bauseitige Anschlüsse

- 1: KW 1/2" 4-6 bar
(Anschluss durch flexible Druckschläuche)
- 2: WW 1/2" 4-6 bar
(Anschluss durch flexible Druckschläuche)
- 3: Wandablauf DN 50
- 4: Elektroanschluss Normsteckdose Unterputz
230 V 50Hz
Abgesichert B 10A Automat
Fehlerstromschutzschalter 30 mA
Potentialausgleich

Alle Maßangaben in mm

An der Montagefläche des Hubgestells dürfen keine Sockel- oder Hohlkehlfleisen sein

Eine Abspernung der Warm- und Kaltwasserleitungen in den Räumlichkeiten ist dringend erforderlich!

Bei Nichteinhaltung der Maße ist eine fachgerechte Installation nicht möglich und die Unkosten werden dem Kunden in Rechnung gestellt.