


Einbauzeichnung Euroblock Pro 90, links

TTranspoRehaMed GmbH, Grünbaumstr. 89, D-42659 Solingen, Tel. 0212/645850-0

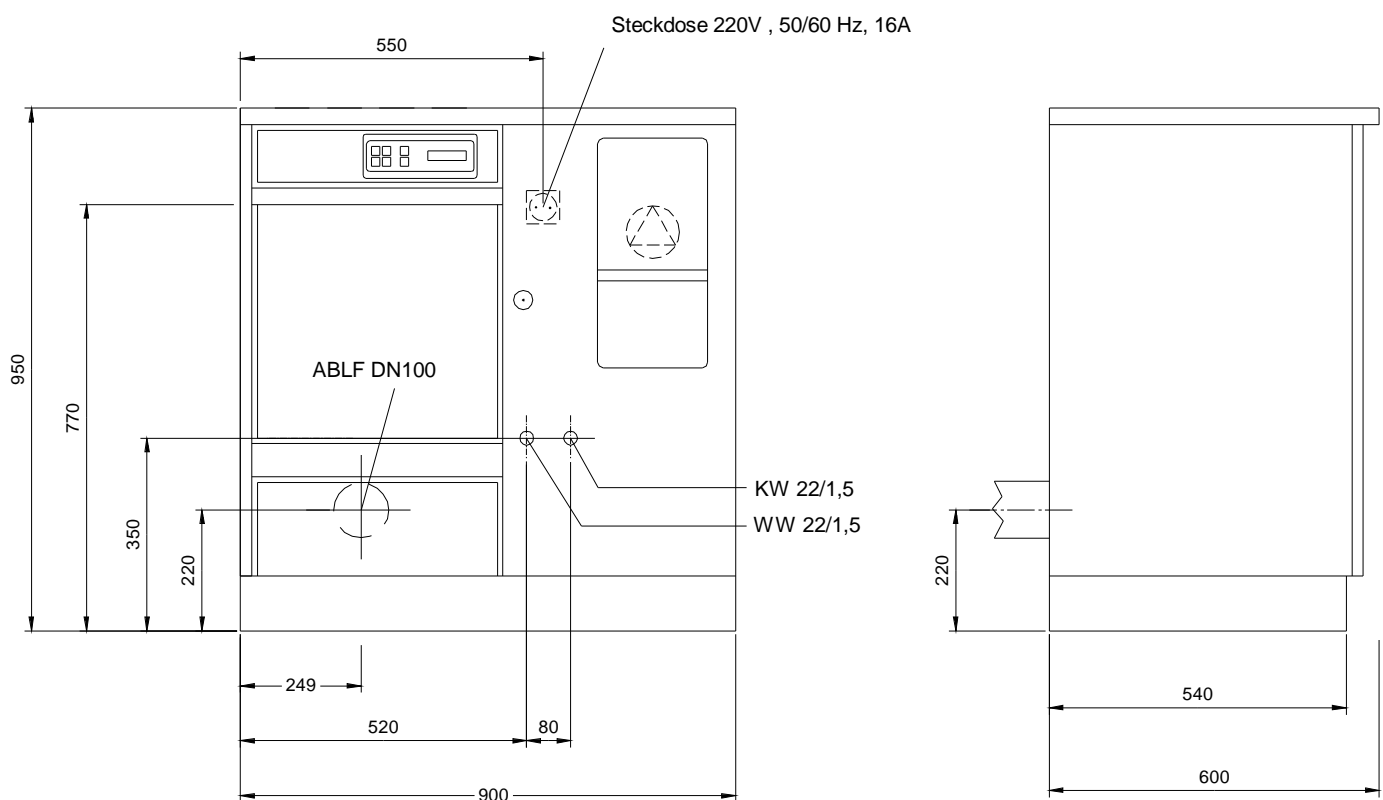

Bauseitige Vorbereitung:

Wasserzufuhr - Warm- und Kaltwasser 1/2" mit 3/4" Außengewinde
(Vorabsperrung bauseits)

Abfluß - HT-Rohr DN 100 (Muffe)

Elektro - Spritzwasser geschützte Normsteckdose, 230V/50Hz, 16A
Potentialausgleich min. 4 mm²