

TR-DUSCHWAGEN 2000/3000

Hydraulisch oder Elektrisch Höhenverstellbar



Technische Daten:

Länge(n)	1600/1900/2100 mm
Breite	705 mm
Höhe	625-925 mm 685-985 mm (Option hohes Fahrgestell für Gurtlift)
Nutzlast	150 KG
Material	teilweise Edelstahl und elektrolytisch verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
4 Leichtlauf-Rollen	2 Stück 100 mm mit Feststeller, 2 Stück 75 mm
Auflage	weiches, flammenhemmendes Material
Batterie (TR 3000)	24 Volt, wiederaufladbar



Registered at Medical Products Agency, Sweden, as a MD Class 1 product, MDD 93/42EEC.


Ein perfektes, höhenverstellbares Dusch- und Transportsystem für den täglichen Einsatz in Pflegeheimen und Krankenhäuser...

Der innovative und stufenlos höhenverstellbare Dusch- und Transportwagen ermöglicht es nur einer einzigen Pflegekraft einen bettlägerigen Bewohner sicher vom Bett zur Dusche zu überführen. Das System eignet sich auch als Notliege. Einen sehr großen **Vorteil** bietet die seitlich angeordnete Hubsäule, wodurch der Duschwagen mit seiner Liegeplatte wesentlich weiter über das Bett als herkömmliche Systeme fährt. Hierdurch wird die Übernahme des Bewohners auf die Liegeplatte noch leichter und kann sogar ohne manuelles Heben erfolgen. Die weiche, wasserfeste und leicht zu reinigende Polsterauflage mit Nackenkissen aus flammenhemmenden Material sorgt während des Transportes dafür, dass sich der Bewohner wohl fühlt und angenehm liegt.

Die Seitengitter lassen sich nicht nur herunter oder in die waagerechte Position klappen, sondern können auch bei engen Türen etwas zusammen geschoben werden. Auch sichert das Seitengitter den Bewohner gegen das Herausfallen ab. Damit das Wasser besser abläuft, lässt sich die Liegeplatte leicht und stufenlos am Kopf- und Fußende neigen. Diese Neigungsverstellung dient auch zur Anwendung der Schocklage. An beiden Enden der Duschauflage befindet sich jeweils eine Ablauföffnung, wodurch man bei der täglichen Arbeit flexibel ist und nicht immer auf die Position des Ablaufschlauchs achten muss. Der im Lieferumfang enthaltene Ablaufschlauch lässt sich leicht an die zwei vorhandenen Ablauföffnungen anbringen. Standard ist der Duschwagen 1900 mm lang. Auf Wunsch gibt es den Duschwagen aber auch in einer Größe von 2100 mm, oder auch extra für Kinder in einer Länge von 1600 mm. Ein Dusch- u. Reinigungspult ist als Option lieferbar.



TR 3000 Rückseite des Fahrgestell mit elektrischer Höhenverstellung über einen Fußtaster.

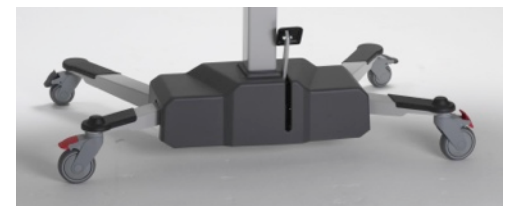

TR 2000 Rückseite des Fahrgestell mit hydraulischer Höhenverstellung über ein Fußpedal.



TR 2000/3000 mit der Option Fahrgestellerhöhung für die Unterfahrbarkeit mit Gurtliftersystemen

TRanspoRehaMed GmbH

Technik zur Unterstützung der Rehabilitation und Pflege von Menschen

Grünbaumstr. 89
42659 Solingen

Tel. 0212-645850-0
Fax. 0212-645850-50

info@transporehamed.de
www.transporehamed.de

TR-DUSCHWAGEN 2000/3000

Hydraulisch oder Elektrisch Höhenverstellbar



Spezifikationen




- * Tragrahmen und Fahrgestell aus teilweise Edelstahl und elektrogalvanisch verzinkten Komponenten mit einer zusätzlichen robusten Pulverbeschichtung
- * Sichere und durchdachte Konstruktion
- * Seitliche Hubsäule, wodurch die Liegefläche weiter über das Bett fährt und der Bewohner leichter übernommen wird
- * Großer Hubbereich 300 mm
- * Große Liegefläche
- * Liegefläche neigbar (Schocklage)
- * Weiche, leicht zu reinigende Polsterauflage aus flammenhemmendes Material
- * inklusive Nackenkissen
- * 2 Abläufe in der gepolsterten Liegeauflage
- * Durchgehende und herunterklappbare Seitengitter, die sich sogar bei engen Türen zusammenschieben lassen
- * 4 Leichtlaufrollen, davon 2 mit Bremse
- * 1 Ablaufschlauch
- * inkl. Ladegerät (bei TR 3000 Elektro Duschwagen).



Option:
Auflage in der Farbe
grau, gelb oder blau



Option: TR 2810 Dusch- und Reinigungspult

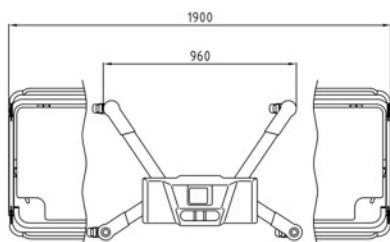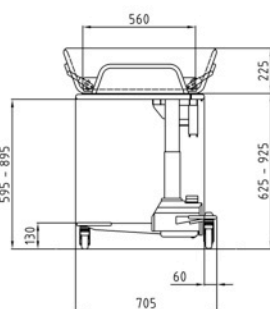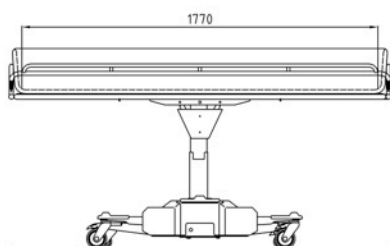

Technische- und Design Änderungen sind vorbehalten

Duschwagen - Hydraulisch		
2000	Standard	L = 1900 mm
2000-S	Kurze Version	L = 1600 mm
2000-L	Lange Version	L = 2100 mm

Duschwagen - Elektrisch (Batterie)		
3000	Standard	L = 1900 mm
3000-S	Kurze Version	L = 1600 mm
3000-L	Lange Version	L = 2100 mm

Optionen gegen Aufpreis	
1.)	Polsterauflage in der Farbe gelb oder blau
2.)	Fahrgestell vom Duschwagen erhöht, für die Unterfahrbarkeit mit Gurtlifter-Systemen.
3.)	Dusch- und Reinigungspult TR 2810

Fachhändler:

TRanspoRehaMed GmbH

Technik zur Unterstützung der Rehabilitation und Pflege von Menschen

Grünbaumstr. 89
42659 Solingen

Tel. 0212-645850-0
Fax. 0212-645850-50

info@transporehamed.de
www.transporehamed.de