


HEBEBADEWANNE COMFORTLINE II



DAS PFLEGE- UND WOHLFÜHLBAD...

DAS PFLEGE- UND...

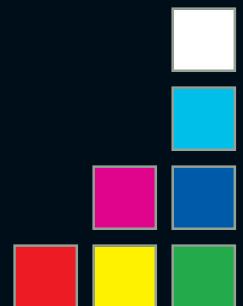

Wannenverkürzer
3-fach einstell- u.
herausnehmbar



Handbrause

Excenter Ab- u.
Überlaufgarnitur



Haltegriffe

Ablaufstopfen



Stufenlose Höhenverstellung
zur Einstellung der optimalen
Einstiegshöhe oder rücken-
schonenden Arbeitsposition
zur Pflege

Beidseitig mit mobilen
Liftersystemen unterfahrbar



Edelstahl-Sicherheits-Standfüße
extra für den Feuchtraum

Aluminium
Hubsäulen




Funktionell, zweckmäßig, leicht bedienbar und günstig...

Freistehende, stufenlos höhenverstellbare, von drei Seiten begehbare und mit Patientensliftersystemen unterfahrbare Elektro-Hebepadwanne.

Durch eine einfache Installation kann das Wannensystem in fast jedem Badezimmer aufgestellt werden.

WOHLFÜHLBAD

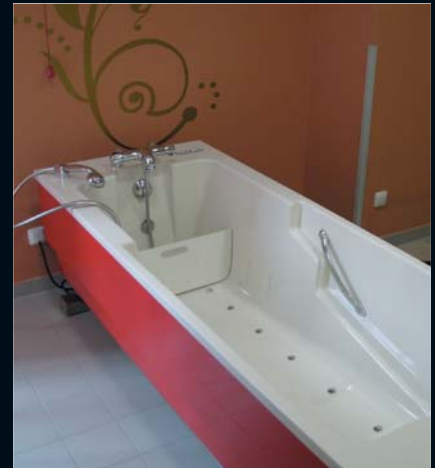

Gestalten Sie Ihr individuelles WOHLFÜHLBAD mit der Hebebadewanne **COMFORTLINE II**



WELLNESS CHARAKTER im PFLEGEBAD...



Durch ein innovatives und hochwertiges Antriebskonzept konnte auf das herkömmliche und voluminöse Technikpult

verzichtet werden, so dass die zu pflegende Person nicht mehr gegen die Technik schaut, sondern gegen den Fliesenpiegel. Auch lässt sich dieses Wannensystem frei in den Raum einplanen, so dass der badenden Person eine Blickrichtung in den Raum ermöglicht wird. Dieses trägt mit dazu bei, dass ein wohnlicher Charakter erzeugt wird.

Weitere WOHLFÜHLOPTIIONEN sind:



system fördert die Durchblutung und regt den Kreislauf an.



übergelenden Farben ein. Das meiste Licht

*Ein **LUFTPERLBAD-SYSTEM** regulierbar, inklusive Steuerung und im Wannenkorboden integrierten Düsen. Das Luftperlbad-

*LED-FARBLICHT-THERAPIESYSTEM

Ein Diodenstrahler färbt das Badewasser flimmerfrei und in wechselnden, in einander

wird von den Augen aufgenommen, wodurch die biologischen Vorgänge im Gehirn aktiviert werden. Dies sorgt für ein absolutes Wohlempfinden. Jede Farbe hat eine andere Wirkung.

*MUSIK-KLANGWELLENSYSTEM



Ein Mp3-Player mit Chipkartenmodul sowie acht Lautsprechern sorgen für eine musikalische Stimmung und Übertragung von sanften Klang-

wellen. Das System wird ohne Musik geliefert, kann aber durch eine leichte Handhabung mit eigener oder therapeutischer Musik bespielt werden. Eine nette Alternative sind auch verschiedene Klänge aus der Natur.

EINSTEIGEN UND ENTSPANNEN...

DER BEWOHNER WIRD ES IHNEN DANKEN!

HEBEBADEWANNE COMFORTLINE II

Standardausstattung Art. 921 E:



reichhaltig und funktionell...

- Stufenlose Höhenverstellung
- Thermostatmischbatterie mit Temperaturbegrenzer
- Handbrause mit langem Schlauch
- Excenter- Ab- und Überlaufgarnitur
- Hochwertiger Wannenkörper mit umlaufender Verkleidung aus glasfaser verstärktem Polyester
- (GFK) in der Standardfarbe weiß
- 2 Haltegriffe, verchromt
- Inkl. Wannverkürzer, 3-fach einstellbar und herausnehmbar
- Inkl. 2 Flex. Edelstahl ummantelten Anschlusschläuchen und einem Spiralablaufschlauch
- 2 breite Standfüße aus Edelstahl extra für Feuchträume

Eigenschaften:

- Innovatives und ansprechendes Design, wohnlicher Charakter im Bad
- Freistehend, ohne Wand- und Bodenverankerung
- Geeignet für mobile Liftersysteme
- Beidseitig unterfahrbar
- Von drei Seiten begehbar
- Kleines Raummaß, kompakte Bauweise
- Ergonomische Wannenkörperform
- Geringes Eigengewicht
- Geringer Wasserverbrauch
- Leicht zu reinigen und zu pflegen
- Leicht zu bedienen
- Schnelle Einweisung
- **Geringe** Anschaffungskosten

Art.-Nr.	ARTIKEL
921 E	HEBEBADEWANNE COMFORTLINE II – wie zuvor beschrieben. Inkl. Thermostatmisch-Batterie, Wannverkürzer, 2 Haltegriffen, Excenter- Ab- und Überlaufgarnitur uvm. Standardfarbe weiß
	ZUBEHÖR GEGEN MEHRPREIS
D	Reinigungs- u. Desinfektionsdusche
A	Automatischer Füllstopp mit 3 Phasen ProLogic-Steuerung
Colour-S.	Wannenkörper u. Verkleidung in RAL-FARBE
	WOHLFÜHLOPTIENEN GEGEN MEHRPREIS
LU	Luftperlbadsystem
L	LED-Farblicht-Therapiesystem
M	Musik-Klangwellensystem

Technische Daten	
Gesamtlänge	2.080 mm
Gesamtbreite	780 mm
Höhe stufenlos einstellbar	650 - 1.000 mm
Hubgeschwindigkeit	12 mm /sek
Nutzinhalt	180 liter
Leergewicht	ca. 100 KG
Strom	230 V/50Hz/10 A
	CE

