

AUFRICHTLIFT 3600

DER AKTIV-LIFT



Die günstige Aufricht- und Umsetzhilfe...

Der Aufrichtlift 3600 unterstützt die Pflegekraft bei der Überführung eines **AKTIVEN** Bewohners mit geschwächter Beinmuskulatur vom Bett auf einen Stuhl, in einen Rollstuhl, oder auf das WC. Der Transfer kann leicht und sicher mit dem Aufrichtlift 3600 von nur einer Pflegekraft durchgeführt werden. Das verstellbare Fahrgestell hilft dabei, die verschiedensten Hindernisse unter einem Bett, einem Rollstuhl und WC zu umfahren, dadurch benötigt der Lifter nur wenig Platz zum manövrieren.

TranspoRehaMed GmbH

Technik zur Unterstützung der Rehabilitation und Pflege von Menschen

info@transporehamed.de
www.transporehamed.de

- Hubwannen
- Pflegewannen
- Sitzlifter
- Liegelifter
- Mehrzwecklifter
- Aufrichtlifter
- Deckenlifter
- Gurtlifter
- Duschwagen
- Haltegriffe
- Steckbecken-
Reinigungs- und
Desinfektionsgeräte
- Pflegemöbel
- u.v.m.

GÜNSTIG, LEICHT BEDIENBAR UND PRAKTISCH....

ELEKTRO-AUFRICHTLIFTER 3600


Standard Ausstattung:

- Robuster Tragrahmen mit Fahrgestell in Farbe lichtgrau
- Handfernbedienung
- Mit Pedal mechanisch verstellbares Fahrgestell
- Elektrische Höhenverstellung **inkl. NOTSTOP** und **NOTABSENKUNG!**
- Wechselakku zum entnehmen
- Ladegerät in der Steuerung integriert
- Aufrichtarm mit 2 Punktaufnahme für verschiedene Aufrichtgurte
- Ohne Werkzeug zusammenklappbar
- CE-Zeichen



Technische Daten:

Maximal Belastung:	150 KG	Notstopp	Ja
Maximale Hubhöhe	1510 mm	Notabsenkung	Ja
Minimale Hubhöhe	820 mm	Ladegerät	Ja
Fahrgestelllänge	1100 mm	24 V / 150 mA	
Kleinste Fahrgestellbreite (Außen)	650 mm	Ladeanzeige über LED	Ja
Verstellbare Fahrgestellbreite (Außen)	650 bis 975 mm	Farbe	lichtgrau
Strom	24 Volt		
Gewicht ohne Zubehör	ca. 54 kg		

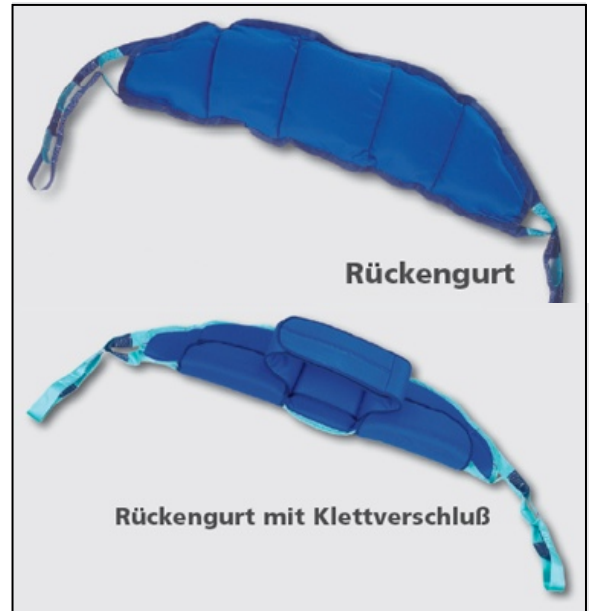

ARTIKEL-NR	ARTIKEL-BESCHREIBUNG
TRH003600	ELEKTRO-AUFRICHTLIFT Ausf. wie beschrieben!
TRH-AL80-AFSOO-M	AUFRICHTGURT für Aufrichthilfe, mit Schlaufeneinhängung, inklusive Bauchfixiergurt Grösse "M"
TRH-AL81-AFSOO-L	AUFRICHTGURT für Aufrichthilfe, mit Schlaufeneinhängung, inklusive Bauchfixiergurt Grösse "L"
TRH-AL81-AFSOO-XL	AUFRICHTGURT für Aufrichthilfe, mit Schlaufeneinhängung, inklusive Bauchfixiergurt Grösse "XL"

TRanspoRehaMed GmbH

Technik zur Unterstützung der Rehabilitation und Pflege von Menschen

Grünbaumstr. 89
42659 Solingen

Telefon 0212-645850-0
Telefax 0212-645850-50

info@transporehamed.de
www.transporehamed.de