

# TR 9650-2 - MEHRZWECKKLIFTER

Elektro-Mehrzwecklifter mit vielen Vorteilen



## Technische Daten:


Breite	1940 mm
Tiefe	870 mm
Höhe	1730 mm
Arbeitshöhe	195 - 965 mm (Unterkante)
Hubbereich	770 mm
Nutzlast	150 Kg
Strom	Akku 24 V aufladbar
Entladeschutz	Signalton



Registered at Medical Products Agency, Sweden, as a MD Class 1 product, MDD 93/42EEC.



Seitenteile am Kombi-Pflegestuhl einhängbar!

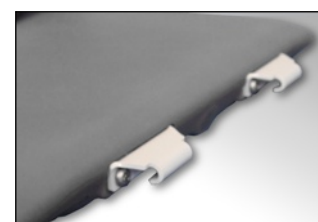

Eine Bodenaufnahme ist dank spezieller Antriebstechnik ohne Probleme möglich!




## Elektro-Mehrzwecklifter

Der praxisgerechte Badelifter....

Der TR-Elektro-Mehrzwecklifter basiert auf jahrelanger Erfahrung im Bereich des Patienten-Handling und bietet in seiner **NEUEN**, überarbeiteten Form viele Vorteile, die die tägliche Arbeit am und mit dem Bewohner / Patienten erleichtert. Seine hochwertigen Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten dem Bewohner / Patienten grossen Komfort bei der täglichen Anwendung. Als Grundmodell wird der Mehrzwecklifter als Sitzlifter geliefert und bietet neben der bereits vorgerüsteten Armlehne für den Badeliegeneinsatz, die Möglichkeit den Stuhl, durch Einhängen von Bein- und Rückenteil, ohne Werkzeug in einen Liegelifter zu verwandeln. Das Badeliegen-Set TR9656 ist optional erhältlich und kann jederzeit nachgerüstet werden.

# TR 9650-2 - MEHRZWECKKLIFTER


Elektro-Mehrzweckklifter mit vielen Vorteilen

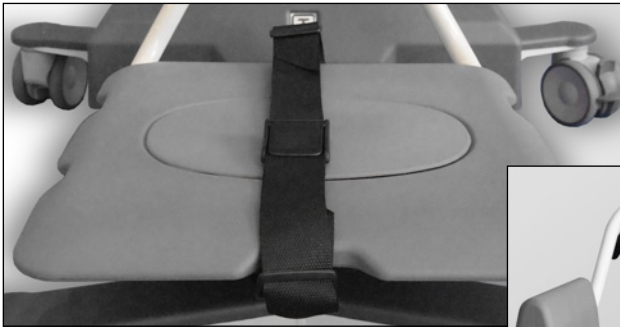


Sitz- und Rückenteil aus **PUR**-Schaum, für ein angenehmes Sitzgefühl für den Bewohner. Der Sitz ist standardmäßig mit Pflegeöffnungsabdeckung ausgestattet.



**EASY-STEP** Fahrgestell, zum leichten Aufsteigen des Bewohners / Patienten, ohne Stolperfalle beim rückwertigen Aufsteigen auf den Pflegestuhl!

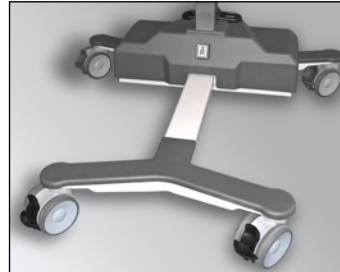

Die vorderen Rollen, können für den Geradeauslauf arretiert werden.

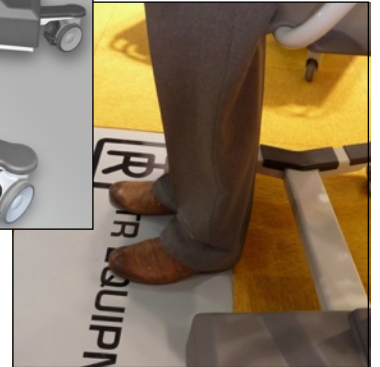

## Badeliegen-Set TR9656



**bestehend aus:**

- 2 Liegeplatten aus **PUR**-Schaum mit Sicherheitsgurt, zum Einhängen in den Kombi-Pflegestuhl.
- 1 Nackenkissen mit Befestigungsband

**EASY-PLUG** Ladeadapter, die Ladeverbindung wird bei Zugbelastung **AUTOMATISCH** getrennt. Das Abreißen des Ladesteckers wird so unterbunden!



## Optionales Zubehör:

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
TR9656	Badeliegen-Set mit Nackenkissen

Technische- und Design Änderungen sind vorbehalten

Fachhändler:

**TRanspoRehaMed GmbH**

Technik zur Unterstützung der Rehabilitation und Pflege von Menschen

Grünbaumstr. 89  
42659 Solingen

Tel. 0212-645850-0  
Fax. 0212-645850-50

info@transporehamed.de  
[www.transporehamed.de](http://www.transporehamed.de)