

## Stuhlwaage MCC

Ergonomisch optimierte Stuhlwaage mit Eich- und Medizinzulassung  
für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik



Ihr Fachhändler:


**TRanspoRehaMed GmbH**

Technik zur Unterstützung der Rehabilitation und Pflege von Menschen

Grünbaumstr. 89  
42659 Solingen

Tel. 0212-645850-0  
Fax. 0212-645850-50

info@transporehamed.de  
www.transporehamed.de

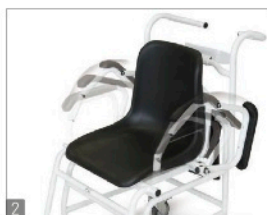

### Merkmale

- Eichklasse III (Eichung optional)
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Fahrbare Ausführung mit besonders komfortablen Feststellbremsen an allen 4 Rädern
- Durch ihre vier Räder gewährleistet diese Stuhlwaage ein Höchstmaß an Mobilität im Verbringen zum Patienten. Dadurch wird eine höhere Zeiteffizienz des Klinikpersonals sowie eine verbesserte Sicherheit der Patienten erreicht, die in ihrem gewohnten Umfeld gewogen werden können
- Die vier lenkbaren Rollen ermöglichen durch ihren großen Querschnitt ein bequemes Überwinden von Türschwellen, Kanten und Spalten von Personenaufzügen. Alle vier Rollen sind einzeln und sicher arretierbar
- Diese Stuhlwaage ist das ideale Messinstrument für Altenheime, Reha-Zentren und Kliniken mit hohem Patientenaufkommen, einschließlich Wiegungen im adipösen Bereich bis 250 kg
- Für gebrechliche Patienten bietet die bequeme, ergonomisch optimierte Sitzschale sicheren Halt während der Wiegung
- Durch die deutlich kontrastierende schwarze Farbe von Sitzfläche, Fuss- und Armauflagen, ideal für Demenzpatienten geeignet
- Zwei umklappbare Armlehnen und Fußstützen erleichtern das Platznehmen. Ideal für übergewichtige Patienten oder zum barrierefreien Umsetzen z. B. vom Bett auf die Stuhlwaage
- Ergonomisch angeordnete Handgriffe

- Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste für 10 s „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit den Wägewert in Ruhe abzulesen
- Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 s um 1 Stelle erhöht werden

### Technische Daten

- Praktische Netzadaptertasche an der Stuhlrückseite sowie Netzadapter (extern) serienmäßig
- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Auswertegerät BxTxH 200x128x55 mm
- Gesamtabmessungen BxTxH 625x990x985 mm
- Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 40 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h
- Nettogewicht ca. 22 kg

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY



In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] kg	Eichwert [e] kg	Gesetzlich vorgeschrieben		Option	
				Eichung		DKD Kalibrierschein	
MCC 250K100M	250	0,1	0,1	III		DKD	
				965-129		963-129	

### Piktogramme:



**Erschütterungsfreies Wägen:**  
Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert.



**Akku-Betrieb:**  
Wiederaufladbares Set.



**Netzadapter:**  
230V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA lieferbar.



**Palettenversand per Spedition:**  
Die Dauer der internen Produktbereitstellung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.



**Gewährleistung:**  
Die Gewährleistungsdauer ist im Piktogramm angegeben.



**DKD-Kalibrierung:**  
Die Dauer der DKD-Kalibrierung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.



**Eichung:**  
Die Dauer der Eichung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.