

## Personenwaage MPE

Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik



**MPE-PM**  
mit Stativ

**MPE-HM**  
mit Stativ und  
Größenmessstab

Ihr Fachhändler:


**TRanspoRehaMed GmbH**

Technik zur Unterstützung der Rehabilitation und Pflege von Menschen

Grünbaumstr. 89  
42659 Solingen

Tel. 0212-645850-0  
Fax. 0212-645850-50

info@transporehamed.de  
www.transporehamed.de

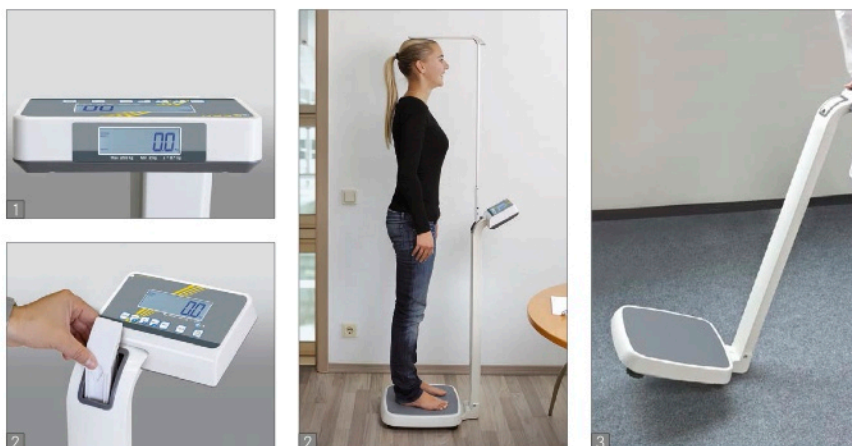

### Merkmale

- Eichklasse III (Eichung optional)
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- **1** Praktische Zweitanzeige an der Waagerrückseite, dadurch bequem vom Patienten und dem Arzt oder Pflegepersonal ablesbar
- **2** Das Modell MPE-HM verfügt über einen elegant im Stativ integrierten, ausziehbaren Höhenmessstab, mit einem Messbereich von 88-200 cm
- Die ergonomisch optimierte Bauform und die robuste Ausführung, prädestinieren diese Serie für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe. Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Große Trittläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit des Patienten
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Erschütterungsfreies Wägen: Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert, ideal für unruhig stehende Patienten
- Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste für 10 s „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit den Wägewert in Ruhe abzulesen
- Mutter-Kind-Funktion: das durch Wägung ermittelte Gewicht der Mutter wird per Knopfdruck auf Null gestellt. Anschließend werden Mutter und Kind gemeinsam gewogen. Das Gewicht des Kindes wird nun direkt im Display angezeigt Besonders angenehm für Kleinkinder, die dadurch sicher und geborgen auf dem Arm der Mutter gewogen werden können

- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 s um 1 Stelle erhöht werden
- **3** 2 Rollen zum bequemen Transport der Waage

### Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte BxTxH 365x360x80 mm
- Gesamtabmessungen MPE-HM: BxTxH 365x620x2125 mm (mit ausgefahrenem Höhenmessstab), MPE-PM: BxTxH 365x450x1020 mm
- Netzadapter (extern) serienmäßig
- Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
- Nettogewicht ca. 12 kg

### Zubehör

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 40 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, **MBC-A03**
- Schnittstellenkabel RS-232 zum Anschluss eines externen Geräts, **CFS-A01**

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY



**4** In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Gesetzlich vorgeschrieben		Option	
				Eichung		DKD Kalibrierschein	
	[Max] kg	[d] kg	[e] kg	M III		DKD	
MPE 250K100PM	250	0,1	0,1	965-129		963-129	
MPE 250K100HM	250	0,1	0,1	965-129		963-129	

### Piktogramme:



**Justierprogramm (CAL):**  
Zum Einstellen der Genauigkeit.  
Externes Justiergewicht notwendig.



**Netzadapter:**  
230V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA lieferbar.



**Gewährleistung:**  
Die Gewährleistungsdauer ist im Piktogramm angegeben.



**Datenschnittstelle RS-232:**  
zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk.



**Akku-Betrieb:**  
Wiederaufladbares Set.



**DKD-Kalibrierung:**  
Die Dauer der DKD-Kalibrierung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.



**Erschütterungsfreies Wägen:**  
Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert.



**Paketversand per Kurierdienst:**  
Die Dauer der internen Produktbereitstellung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.



**Eichung:**  
Die Dauer der Eichung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.