

DUSCH- UND TOILETTENSTUHL - 11004020 ELEKTRISCH



Registered at Medical
Products
MD Class 1 product,
MDR 2017/745.

Nutzlast bis 150 KG

Elektro-Dusch- und Toilettenstuhl

Der höhen- und neigungsverstellbare Duschstuhl 11004020, ist die ideale Lösung wenn es um das Duschen von pflegebedürftigen Menschen mit Hilfe von nur einer Pflegekraft geht. Das Duschen, die Haarwäsche, sowie die Pediküre werden mit dem Duschstuhl 11004020 für den Pflegebedürftigen und der Pflegekraft zu einer angenehmen und würdevollen Pflegeroutine. Die batteriebetriebene Höhenverstellung gewährleistet die optimale Einstellung der ergonomischen Arbeitshöhe beim Duschen. Eine Neigungsverstellung nach hinten, im Zusammenspiel mit der hohen Rückenlehne, sorgen beim Duschen für eine angenehme, komfortable und sichere Sitzposition. Die zusätzliche Neigungsverstellung nach vorne unterstützt die Übernahme der Person von einem Rollstuhl oder einem Lifter.

Spezifikationen 11004020:

Gesamtbreite:	670 mm
Gesamttiefe:	820 mm (Ohne Kopf- und Fußstütze)
Gesamthöhe:	1000 mm (Ohne Kopfstütze)
Hubbereich:	540 - 890 mm (Sitzfläche)
Max. Nutzlast:	150 kg
Leergewicht:	ca. 40 kg
Höhenverstellung:	Elektrisch über Kabelhandbedienung, 24 V Batteriebetrieben
Schutzklasse:	IPX6



TRanspoRehaMed GmbH

Grünbaumstr. 89
42659 Solingen
info@transporehamed.de

Tel.: +49 (0)212-645850-0
Fax: +49 (0)212-645850-50
www.transporehamed.de

DUSCH- UND TOILETTENSTUHL - 11004020 ELEKTRISCH

Vorteile / Eigenschaften:

- Leise und sanfte Höhenverstellung
- Wegklappbare Armstützen, für einen effizienten und sicheren Patiententransfer auf den Stuhl
- Kopfstütze in der Höhe und Neigung verstellbar
- Sitz- und Rückenteil aus PUR, für einen angenehmen Sitzkomfort
- Neigungsverstellung in 2 Richtungen, gewährleisten eine sichere Sitzhaltung bei der Pflege und ein einfaches Auf- und Absteigen am Stuhl


- Sicherheits-Fahrgestell mit 4 Doppel-Lenkrollen, D=100 mm, 2 davon mit Bremse.
- Nutzlast bis 150 kg
- Das Fahrgestell und die Sitzfläche bieten die Möglichkeit über Standard WC's zu fahren oder mit einem Nachtstuhleimer (Option) zu arbeiten.

Optional erhältlich:


- Sicherheitsgurt im Bauchbereich (werksseitig montiert)



Kopfstütze in der Höhe und Neigung verstellbar

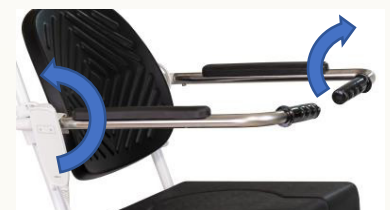

Armstützen schwenk- und wegklappbar

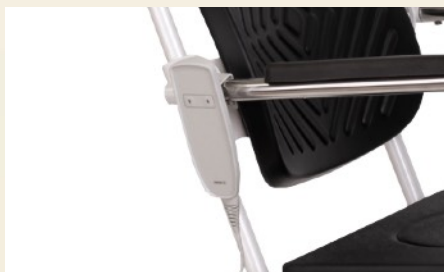

Handbedienung für Höhen- und Neigungsverstellung



Fußstützen schwenk- und wegklappbar

