



Technische Daten:

Gesamtlänge:	1685 mm
Gesamtbreite:	695 mm
Gesamthöhe:	660-960 mm
Strom:	230 V, 50Hz
Wasser:	2 x 1/2"
Abwasser:	DN 50
Gewicht:	ca. 100 kg

Unterfahrbares Wannensystem für die Pflege von Menschen - Gesamtlänge 1685 MM

Die **SHORTLINE** ist vermutlich die kleinste Hubwanne der Welt. Mit ihren kompakten Abmessungen ist sie ideal für kleine Pflegebäder oder den häuslichen Gebrauch geeignet. Der speziell entwickelte Wannenkörper bietet dennoch ausreichend Platz für

den Bewohner. Die Wanne kann sowohl mit einem **TR-Sitzlifter** als auch mit einem **Gurtlifter** genutzt werden. Dank ihrer durchdachten Bauweise ist sie schnell aufgestellt und einfach zu installieren.



Kabelhandbedienung zur Höhenverstellung

Thermostatmischer 1/2" mit Verbrühschutz



TR 1700 - SHORTLINE

PFLEGE- UND HUBWANNE



HUBWANNE SHORTLINE

ART.: 800


- Ergonomisch geformter Wannenkorpus
- Wannenkorpus aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Die Blech-Verkleidung mit spezieller Pulverbeschichtung
- Ab- und Überlaufgarnitur
- Bodenfreiheit für fahrbare Liftersysteme
- Elektrische Höhenverstellung über zwei Antriebe mit Synchronsteuerung und Handtaster
- Arbeitshöhe 660-960 mm

ART.: 850

- Hubwanne wie zuvor beschrieben, jedoch mit aufgesetztem Thermostatmischer inkl. Handbrause und langem Brauseschlauch.



Wir empfehlen zu dieser Wanne unsere **TR-Sitz- oder Liegelifter**, um den Transfervorgang sicher und komfortabel zu gestalten.

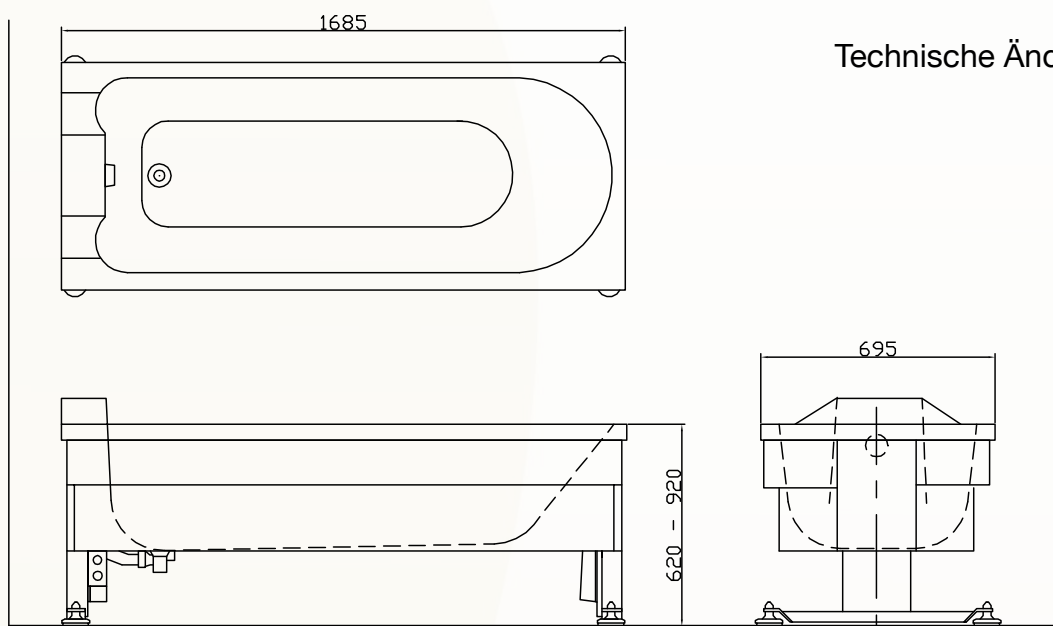

Technische Änderungen vorbehalten!



TRanspoRehaMed GmbH

Grünbaumstr. 89
42659 Solingen
info@transporehamed.de

Tel.: +49 (0)212-645850-0
Fax: +49 (0)212-645850-50
www.transporehamed.de