



Technische Daten:

Gesamtlänge:	2080 mm
Gesamtbreite:	780 mm
Einstiegshöhe:	650 mm
Strom:	230 V, 50Hz
Wasser:	2 x 1/2"
Abwasser:	DN 50
Max. Nutzlast:	150 kg

Unterfahrbare Hub- und Pflegewanne

Die Wanne mit wohnlichem Charakter

Die Hub- und Pflegewanne **COMFORT LINE** ist die perfekte Kombination aus Pflege- und Wohlfühlwanne. Durch ihre durchdachte Bauweise ist sie der ideale Begleiter im Pflegealltag. Mit optionalen Erweiterungen lässt sich die Wanne zu einer echten **Wohlfühlloase**

verwandeln. Vom **Luftperlbad-System** über das **Therapielicht-System** bis hin zum **Klangwellen-Soundsystem** – unsere Pflegewanne **COMFORT LINE** bietet alles für ein entspannendes und sicheres Badeerlebnis.

Thermostatmischer 1/2" mit Verbrühschutz und Höchsttemperaturanschlag bei 43°C



Haltegriffe und Wannenverkürzer für ein **+Plus** an Sicherheit

Ausstattung:

- Ergonomisch geformter Wannenkorpus
- Wannenkorpus und Verkleidung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Ab- und Überlaufgarnitur
- Bodenfreiheit für fahrbare Liftersysteme
- 4 einstellbare Standfüße zum Ausgleich bei Bodenunebenheiten
- Synchrongesteuertes Antriebssystem für sanfte und gleichmäßige Höhenverstellung
- 1/2" Thermostatmischer mit Verbrühschutz und Höchsttemperaturanschlag bei 43°C, inkl. Handbrause und langem Brauseschlauch
- Standardfarbe Weiß, andere Farben optional lieferbar
- Haltegriffe zur Unterstützung des Bewohners
- Einstell- und herausnehmbarer Wannenverkürzer

OPTIONEN:

A - Automatische Wannenbefüllung

L - LED Lichtsystem

LU - Luftperlbad-System

M - Soundsystem über Bluetooth oder Line-In




COLOUR - Wanne in allen RAL-Tönen lieferbar

GA - Gedrehte Ausführung mit Blick in den Raum

D - Integriertes Reinigungssystem



Wir empfehlen zu dieser Wanne unseren TR-Sitz- oder Liegelifter, um den Transfer noch sicherer und komfortabler zu gestalten.

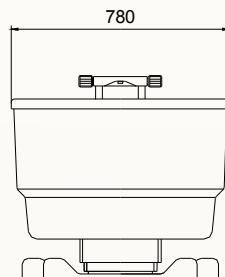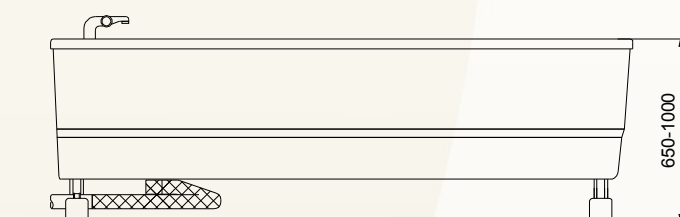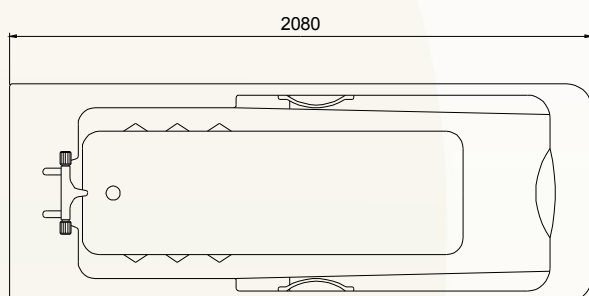

Technische Änderungen vorbehalten!