



Technische Daten:

Gesamtlänge:	2116 mm
Gesamtbreite:	936 mm
Einstiegshöhe:	650 mm
Strom:	230 V, 50Hz
Wasser:	2 x 1/2"
Abwasser:	DN 40
Max. Nutzlast:	250 kg

Unterfahrbare Hub- und Pflegewanne

Die Wanne mit extra breitem Wannenkorpus und wohnlichem Charakter!

Die Hub- und Pflegewanne SPACE^{LINE} ist die perfekte Kombination aus Pflege- und Wohlfühlwanne. Durch den extra breiten Wannenkörper und der max. Nutzlast von **250 kg**, bietet die Wanne auch adipösen Bewohnern / Patienten genügend Platz für ein Entspannungsbad und ist so der perfekte Begleiter bei der täglichen Pflege.

Durch optionale Erweiterungen kann die Wanne von der Pflegewanne in ein Wohlfühlloose verwandelt werden. Vom Luftperlbad-System über Therapielicht-System oder Klangwellen-Soundsystem, bietet unsere Pflegewanne SPACE^{LINE} alles für einen entspannten Aufenthalt in der Wanne.

Thermostatmischer 1/2" mit Verbrühschutz und Höchsttemperaturanschlag bei 43°C



Haltegriffe und Wannenverkürzer für ein **+Plus** an Sicherheit

TR 930 - SPACE^{LINE}

HUB- UND PFLEGEWANNE



ART.: 930

- Ergonomische Form des Wannenkorpus
- Wannenkorpus und Verkleidung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Ab- und Überlaufgarnitur
- Bodenfreiheit für fahrbare Liftersysteme
- 4 einstellbare Standfüße zum Ausgleich bei Bodenunebenheiten
- Synchrongesteuertes Antriebssystem für eine sanfte und gleichmäßige Höhenverstellung
- 1/2" Thermostاتمischer mit Verbrühschutz und Höchsttemperaturanschlag bei 43°C, inkl. Handbrause und langem Brauseschlauch
- Standardfarbe weiß, andere Farben optional lieferbar
- Haltegriffe zur Unterstützung des Bewohners
- Wannenverkürzer, einstell- und herausnehmbar

OPTIONEN:

A - Automatische Wannenbefüllung

L - LED Lichtsystem

LU - Luftperlbad-System

M - Sound-System über Bluetooth oder Line-In


COLOUR - Wanne in allen RAL-Tönen lieferbar

GA - Gedrehte Ausführung mit Blick in den Raum

D - Integriertes Reinigungssystem



Wir empfehlen zu dieser Wanne unseren TR-Sitz- oder Liegelifter.

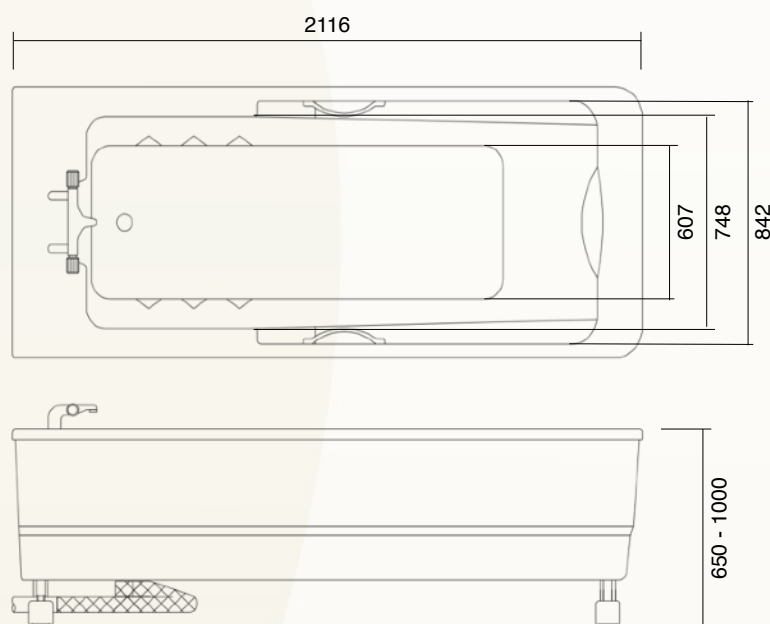

Technische Änderungen vorbehalten!



TRanspoRehaMed GmbH

Grünbaumstr. 89
42659 Solingen
info@transporehamed.de

Tel.: +49 (0)212-645850-0
Fax: +49 (0)212-645850-50
www.transporehamed.de